




## Balão de Reinalação - Borracha

O produto é projetado e indicado para uso em procedimentos de anestesia. Possui formato anatômico e de fácil manuseio e sensibilidade. Pode ser utilizado em aparelhos de anestesia, circuitos ventilatórios, conjuntos de anestesia e sistema duplo t baraka.

### Balão de Borracha Látex (Verde)

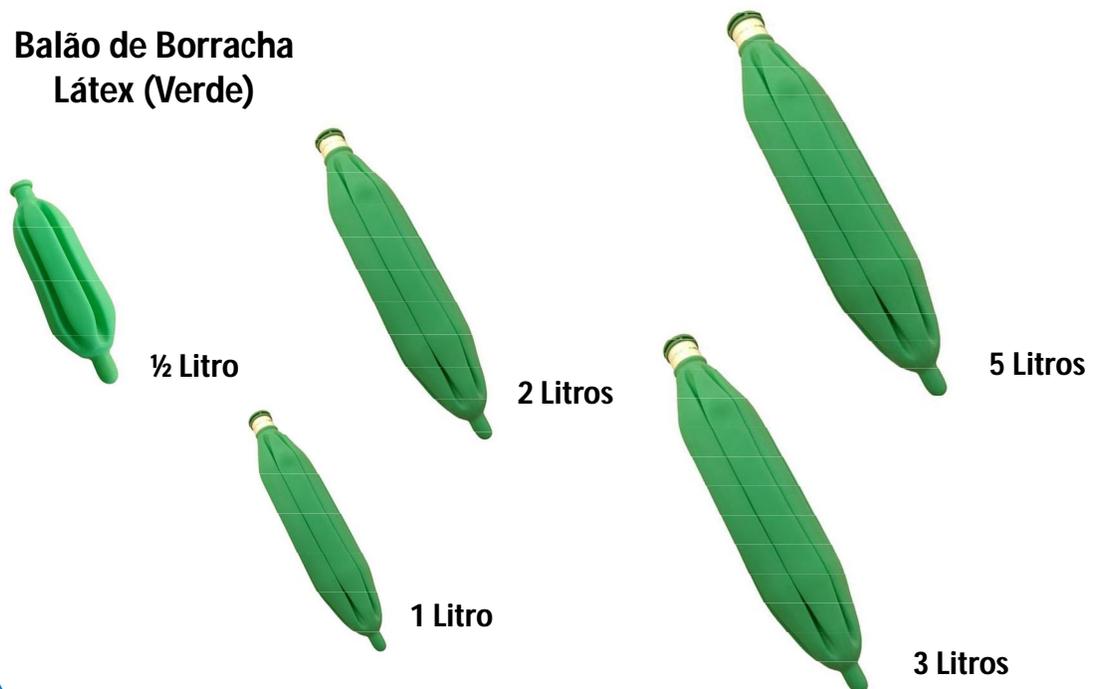

### Acessórios (Pulmão Teste):



Oxigel Materiais Hosp. Ind. e Com. Eireli  
PABX: 11 5567 1766 - Vendas: 11 5567 1764



WhatsApp: 11 5567 1762

[oxigel@oxigel.com.br](mailto:oxigel@oxigel.com.br)

[www.oxigel.com.br](http://www.oxigel.com.br)

# BALÃO DE BORRACHA

## Registro no M.S. 10330520038

(NÃO ESTERILIZADO - PRODUTO DE USO ÚNICO)

Nº PARTE: 1-100-0031 1-100-0032 1-100-0033 1-100-0034 1-100-0035

Modelo: 0,5 litro 1 litro 2 litros 3 litros 5 litros

Nº PARTE: 7-705-8034 7-705-6010

Modelo: 0,5 litro 50 mL

### CONTEÚDO:

1 Balão de borracha (látex) com conexão cônica interna de 22 mm. Capacidade conforme modelo.

### DESCRIÇÃO / INDICAÇÕES:

O produto é projetado e indicado para uso em procedimentos de anestesia inalatória.

### ADVERTÊNCIAS:

As seguintes advertências e cuidados devem ser lidos e entendidos antes do uso do produto:

1. A anestesia inalatória requer treinamento muito especializado, de forma que o produto só pode ser usado por pessoas que tenham recebido tal treinamento.
2. PRODUTO PARA USO ÚNICO. Sua reutilização pode provocar infecção cruzada de paciente para paciente. Antes de utilizá-lo faça o procedimento de desinfecção a seguir. DESTRUA APÓS O USO.
3. Mantenha o balão em sua embalagem selada até o momento da utilização.
4. Pode ocorrer deterioração do balão se exposto a temperaturas acima de 40° C ou à luz ultra-violeta por períodos longos de tempo.

**Obs.:** Em locais onde a anestesia inalatória é rotineira, como salas de operação, é recomendável ter balões de reposição disponíveis, já que qualquer objeto cortante pode danificar o balão.

### INSTRUÇÕES DE USO:

Ver instruções disponíveis nos manuais de aparelhos / sistemas de anestesia.

### PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO INICIAL:

O produto deve passar por um processo de desinfecção antes do uso. Para isso:

1. Remova qualquer resíduo existente.
2. Prepare solução de Glutaraldeído a 2% de acordo com as instruções do fabricante.
3. Mantenha o balão totalmente imerso na solução por um período de 30 minutos.
4. Usando luvas, enxágüe-o em álcool ou água estéril e deixe secar.
5. Acondicione-o individualmente de modo a ficar protegido contra contaminação até a sua utilização.

### ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

O produto deve ser armazenado em local limpo, fresco e seco, sob temperaturas entre 5°C e 35°C e umidade relativa do ar entre 35 e 80%. Deve ser protegido de luz direta do sol e vapores químicos. Para transporte são admitidas variações de  $\pm 5^\circ\text{C} / 5\%$ .

### NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE, MODELO E DATA DE FABRICAÇÃO:

Ver rótulo colado na embalagem plástica do produto.

### GARANTIA:

O produto é garantido pelo prazo de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação a partir da data de compra pelo consumidor final, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra, desde que seja obedecida esta instrução. Despesas de transporte etc ocorrem por conta do comprador. Não perca ou altere o rótulo que acompanha o produto durante sua vida útil.

### FABRICADO E PRODUZIDO POR:

OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EIRELI  
Rua Eng. Jorge Oliva, 131 - V. Mascote - CEP 04362-060  
São Paulo - SP - Tel.: +55 11 5567 1766 - Fax: +55 11 5564 5013  
CNPJ: 49.353.956/0001-66 - Autorização de funcionamento M.S.: 1.03.305-2  
Home Page: <http://www.oxigel.com.br> - E-mail: [oxigel@oxigel.com.br](mailto:oxigel@oxigel.com.br) - Indústria Brasileira  
Resp. Técnico: DÉBORA C. DE SOUZA - 04496795

CÓDIGO	REVISÃO Nº	DATA	PÁGINA
3-990-0002	11	Jul./2022	01 / 01

# BALÃO DE BORRACHA

## Registro no M.S. 10330520038

(NÃO ESTERILIZADO - PRODUTO DE USO ÚNICO)

Nº PARTE: 1-100-0031 1-100-0032 1-100-0033 1-100-0034 1-100-0035

Modelo: 0,5 litro 1 litro 2 litros 3 litros 5 litros

Nº PARTE: 7-705-8034 7-705-6010

Modelo: 0,5 litro 50 mL

### CONTEÚDO:

1 Balão de borracha (látex) com conexão cônica interna de 22 mm. Capacidade conforme modelo.

### DESCRIÇÃO / INDICAÇÕES:

O produto é projetado e indicado para uso em procedimentos de anestesia inalatória.

### ADVERTÊNCIAS:

As seguintes advertências e cuidados devem ser lidos e entendidos antes do uso do produto:

1. A anestesia inalatória requer treinamento muito especializado, de forma que o produto só pode ser usado por pessoas que tenham recebido tal treinamento.
2. PRODUTO PARA USO ÚNICO. Sua reutilização pode provocar infecção cruzada de paciente para paciente. Antes de utilizá-lo faça o procedimento de desinfecção a seguir. DESTRUA APÓS O USO.
3. Mantenha o balão em sua embalagem selada até o momento da utilização.
4. Pode ocorrer deterioração do balão se exposto a temperaturas acima de 40° C ou à luz ultra-violeta por períodos longos de tempo.

**Obs.:** Em locais onde a anestesia inalatória é rotineira, como salas de operação, é recomendável ter balões de reposição disponíveis, já que qualquer objeto cortante pode danificar o balão.

### INSTRUÇÕES DE USO:

Ver instruções disponíveis nos manuais de aparelhos / sistemas de anestesia.

### PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO INICIAL:

O produto deve passar por um processo de desinfecção antes do uso. Para isso:

1. Remova qualquer resíduo existente.
2. Prepare solução de Glutaraldeído a 2% de acordo com as instruções do fabricante.
3. Mantenha o balão totalmente imerso na solução por um período de 30 minutos.
4. Usando luvas, enxágüe-o em álcool ou água estéril e deixe secar.
5. Acondicione-o individualmente de modo a ficar protegido contra contaminação até a sua utilização.

### ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

O produto deve ser armazenado em local limpo, fresco e seco, sob temperaturas entre 5°C e 35°C e umidade relativa do ar entre 35 e 80%. Deve ser protegido de luz direta do sol e vapores químicos. Para transporte são admitidas variações de  $\pm 5^\circ\text{C} / 5\%$ .

### NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE, MODELO E DATA DE FABRICAÇÃO:

Ver rótulo colado na embalagem plástica do produto.

### GARANTIA:

O produto é garantido pelo prazo de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação a partir da data de compra pelo consumidor final, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra, desde que seja obedecida esta instrução. Despesas de transporte etc ocorrem por conta do comprador. Não perca ou altere o rótulo que acompanha o produto durante sua vida útil.

### FABRICADO E PRODUZIDO POR:

OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EIRELI  
Rua Eng. Jorge Oliva, 131 - V. Mascote - CEP 04362-060  
São Paulo - SP - Tel.: +55 11 5567 1766 - Fax: +55 11 5564 5013  
CNPJ: 49.353.956/0001-66 - Autorização de funcionamento M.S.: 1.03.305-2  
Home Page: <http://www.oxigel.com.br> - E-mail: [oxigel@oxigel.com.br](mailto:oxigel@oxigel.com.br) - Indústria Brasileira  
Resp. Técnico: DÉBORA C. DE SOUZA - CRQ 04496795

CÓDIGO	REVISÃO Nº	DATA	PÁGINA
3-990-0002	11	Jul./2022	01 / 01